



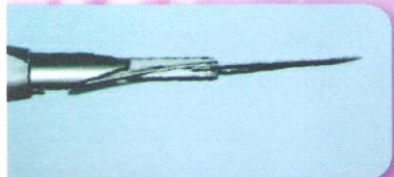

## ZEPF Drop-Control Manche de bistouri

Le manche de bistouri ZEPF Drop-Control réunit le design du manche de bistouri traditionnel réf. 46.007.00 avec une nouvelle fonction révolutionnaire.

## ZEPF Drop-Control Manche de bistouri

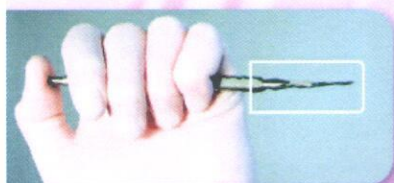

DBGM M1:1

Inspiré du mécanisme d'un stylo à bille, la lame peut être éjectée après l'utilisation en pressant sur le bouton.

Ce développement avait pour but l'utilisation simplifiée, sans modifier le diamètre du manche de bistouri. L'ergonomie de notre manche de bistouri traditionnel est maintenue, c.-à-d. il ne faut pas changer les habitudes d'utilisation. Du point de vue diamètre, design et ergonomie, le manche de bistouri ZEPF Drop-Control se range donc parfaitement dans la série ZEPF-Design des instruments chirurgicaux, implantologiques et microchirurgicaux.

En pressant sur le bouton, un mécanisme est déclenché qui enlève la lame et qui la pousse en avant. Finalement, la lame est éjectée de manière sûre et contrôlée dans un réservoir collecteur pour Sharps.

Ensuite, le mécanisme de déblocage revient à sa position initiale. Après le nettoyage et la stérilisation, on peut positionner une nouvelle lame – comme d'habitude.

Les avantages sont évidents: La lame utilisée peut être déclenchée de façon facile, sûre et contrôlée, et des blessures contaminées ou des infections sont exclues.

NEWS

Désignation d'article

46.007.02 ZEPF Drop-Control  
Manche de bistouri

Quantité commandée

[ ]



HELMUT ZEPF  
MEDIZINTECHNIK GMBH